


Produktinformation

testXpert Analytics – Test Data Management

CTA: 282268

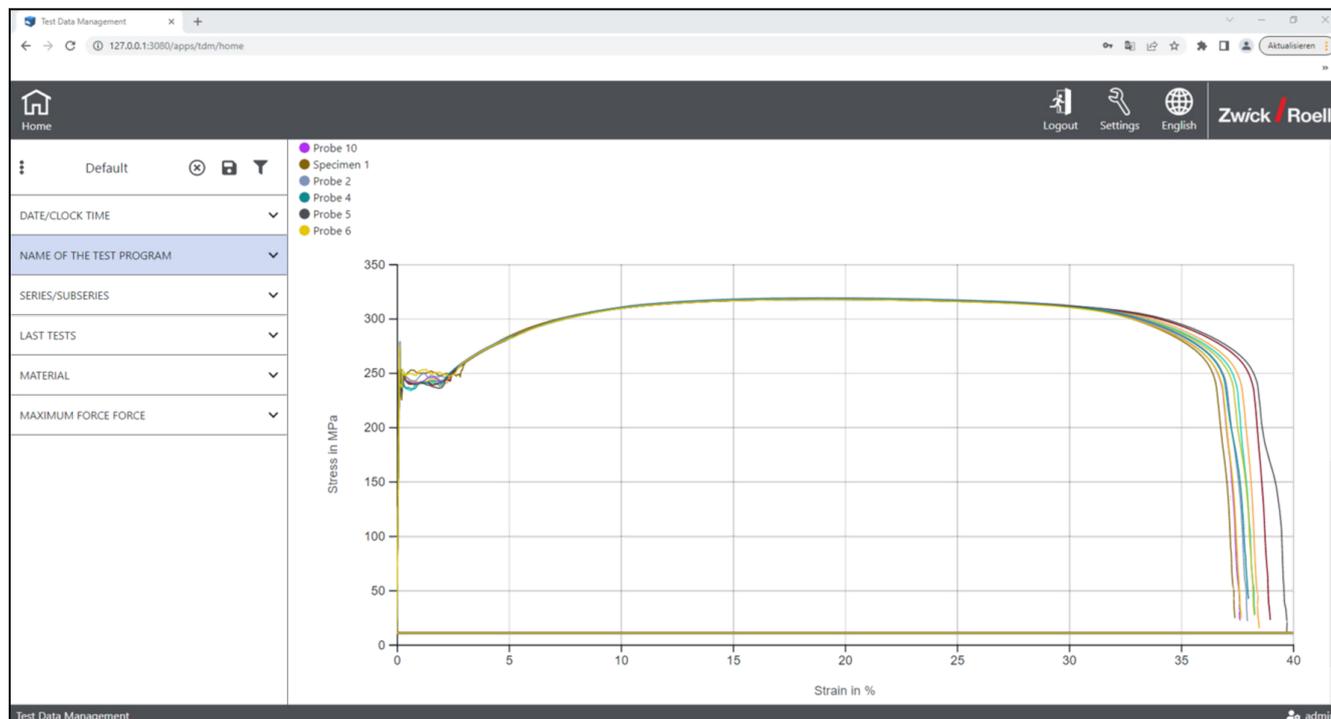

1. Selektionsleiste, 2. Konfigurierbare Ergebnistabelle, 3. Konfigurierbare Statistiktable, 4. Konfigurierbare Seriengrafik, 5. Konfigurierbare Exportfilter

Anwendungsbereich

Einfachster Zugriff auf alle Daten Ihrer Prüfmaschine inklusive der Rohdaten, die testXpert automatisch in einer zentralen Datenbank (testXpert Storage) ablegt. Das Test Data Management greift dazu ohne spezielle Installation per Browser auf diese Daten zu.

Diese Storage befindet sich auf dem Maschinen-PC oder in einer Ausbaustufe auf Ihrem Firmen-Server (testXpert Netzwerkstorage).

Die Selektion der Prüfdaten erfolgt über frei konfigurierbare Filter. Dazu können das Datum, der Name der verwendeten Prüfvorschrift oder verschiedene Parameter verwendet werden. Idealerweise haben Sie in testXpert verschiedene Organisationsdaten angelegt oder per testXpert Upload/Download von Ihrem ERP-System erhalten, nach denen Sie im Test Data Management dann selektieren können.

Funktionsbeschreibung

Die Selektion der Prüfdaten erfolgt über frei konfigurierbare Filter. Dazu können das Datum, der Name der verwendeten Prüfvorschrift oder verschiedene Parameter verwendet werden. Idealerweise haben Sie in testXpert verschiedene Organisationsdaten angelegt oder per testXpert Upload/Download von Ihrem ERP-

System erhalten, nach denen Sie im Test Data Management dann selektieren können.

Vorteile und Merkmale

- Test Data Management ermöglicht schnelle Transparenz aller Prüfdaten inklusiver der Rohdaten für eine vollständige Bewertung der Materialeigenschaften. Es können Daten aus verschiedenen Prüfserien und Maschinen zusammengefasst und gemeinsam analysiert werden.
- Flexibler und schneller Zugriff auf alle Prüfdaten. Ohne zusätzliche Installation kann mit Test Data Management von jedem PC aus auf alle Prüfdaten inklusive der Rohdaten zugegriffen werden.
- Schnelle und bedienerunabhängige Analysen. Die vorbereitete Visualisierungen erlauben eine schnelle Analyse der selektierten Prüfdaten, die über einfache Filter in Standardformate wie Excel exportiert werden können.
- Zukunftssichere Datenhaltung. Alle Prüf- und Maschinendaten der ZwickRoell Material-Prüfmaschinen und Geräte werden in einer sicheren und zentralen Datenbank (lokal oder im Netzwerk) abgelegt.
- Eine einmalig definierte Selektion können Sie einfach abspeichern und jederzeit wieder aufrufen.

PI 435 623

Produktinformation

testXpert Analytics – Test Data Management

- Der so selektierten Datensatz wird im Hauptfenster vom Test Data Management dargestellt und kann so im Detail analysiert werden.
- Sie haben zu jeder Zeit Zugriff auf alle Ihre Prüfdaten und haben den vollständigen Überblick über die durchgeführten Prüfungen und die Qualität Ihrer Produkte.
- Über eine entsprechende Auswahl lassen sich in der Ergebnis- und Statistiktabelle alle Ergebnisse oder Parameter darstellen.
- In der Grafik kann auf alle Kanäle (Rohdaten) zugegriffen werden und typische Proben- oder Seriengrafiken erstellt werden.
- Sie haben zu jeder Zeit Zugriff auf alle Ihre Prüfdaten und haben den vollständigen Überblick über die durchgeführten Prüfungen und die Qualität Ihrer Produkte.

Beschreibung	Artikelnummer
testXpert Analytics – Test Data Management	1113415